

**745/00****SCALPELLO PNEUMATICO PER GESSO CORREDATO DI 3 UTENSILI****UTILIZZO**

Strumento studiato e realizzato esclusivamente per smuffolare e per lavorare modelli di gesso in odontotecnica.

Questo scalpello permette di risparmiare fino all'80% del tempo necessario per smuffolare e di creare con molta rapidità sul modello gli spazi necessari.

DATI TECNICI

Pressione di esercizio: 5-6-atm.

Consumo: 40/50 lt. di aria al minuto.

Peso: 230 gr. (300 gr. inclusa la confezione)
Il funzionamento pneumatico garantisce una lunga durata.

INSTALLAZIONE

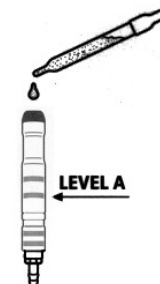
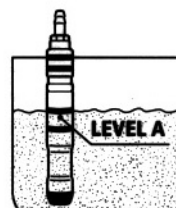
Importante: prima di collegare lo scalpello al tubo, aprire l'aria a vuoto per circa un minuto in modo da espellere eventuali residui di sabbia che entrando in circolo potrebbero grippare il motore.

Può capitare inoltre che, aprendo l'aria il pistoncino non parta poiché si trova in fase neutra: in questo caso è sufficiente spingere con un colpo l'utensile contro il banco di lavoro per riavviare il motore.

MANUTENZIONE

Poiché il compressore produce condensa, è necessario lubrificare lo scalpello ogni fine settimana (anche se il compressore è fornito di filtro) introducendo 2 gocce di gasolio (per auto diesel) nel foro di inserimento degli utensili, lasciandolo poi in verticale (vedi Fig.1).

Se lo scalpello rimane inutilizzato per un periodo superiore a 10 gg. deve essere immerso, senza utensile, fino al livello A in un barattolo di gasolio (vedi Fig.2) e ivi lasciato per tutto il tempo. Si consiglia infine una accurata affilatura periodica degli utensili.

**WEEKEND****VACANZE****RICAMBI**

745/20 Utensile lama piccola mm 7

745/21 Utensile lama media mm 9

745/22 Utensile lama grande mm 11

GARANZIA

Un anno (la garanzia è valida se lo strumento è stato usato alle condizioni prescritte nel presente foglio di istruzioni d'uso).

Carlo De Giorgi s.r.l. Via Tonale 1 – 20021 Baranzate (MI) – ITALY www.degiorgi.it
Tel. +39 02 3561543 / Fax +39 02 3561808/ e-mail: info@degiorgi.it

**745/00****PNEUMATIC HAMMER CHISEL FITTED WITH 3 TOOLS****USE**

This chisel has been designed exclusively for deflasking and working stone models in dental technology.

The use of this instrument saves up to 80% of the deflasking time and permits rapid creation of the necessary spaces on the model.

TECHNICAL DATA

Operative pressure: 5-6-atm.

Consumption: 40/50 litres of air per minute.

Weight: 230 grams (300 gr. including packaging).
The pneumatic functioning guarantees long life.

INSTALLATION

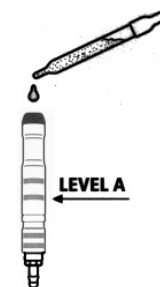
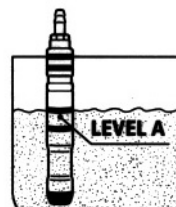
Warning: before connecting the chisel to the pipe, open the air for one minute to blow away any residues of sand eventually deposited; sand or microscopic metallic particles can block and damage severely the motor.

It may occur also that, after opening the air, the piston does not start because it is in the neutral phase: in this case, pushing the tool against the desk will start the cycle again.

MAINTENANCE

Since the compressor produces condensate, the chisel **must be lubricated** (even if the compressor has a filter) with a few drops of Diesel fuel oil at the end of every week: apply the oil to the lubrication point (see Fig.1) and leave the chisel in vertical position.

If the chisel is left idle for more than 10 days it should be immersed without the tool in a in of Diesel oil **up to level A** for the whole period (see Fig.2). It is recommended to keep the tools always sharp.

**WEEKEND****HOLIDAY****REFILLS**

745/20 Small blade tool (7 mm)

745/21 Medium blade tool (9 mm)

745/22 Large blade tool (11 mm)

GUARANTEE

One year (the guarantee is valid only if the chisel is used according to the enclosed instructions of use and maintenance).

Carlo De Giorgi s.r.l. Via Tonale 1 – 20021 Baranzate (MI) – ITALY www.degiorgi.it
Tel. +39 02 3561543 / Fax +39 02 3561808/ e-mail: info@degiorgi.it