




ASPIRATORE CON PULITRICE INCORPORATA MODELLO SENIOR MANUALE DI INSTALLAZIONE USO E MANUTENZIONE

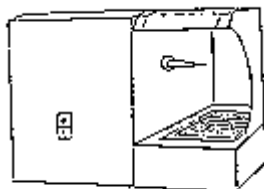

INSTALLAZIONE ==> l'apparecchio SENIOR potrà funzionare in condizioni di sicurezza con migliori risultati se sarà correttamente installato nell'ambiente di lavoro. Pertanto dovrà essere posizionato in piano su un supporto stabile vicino ad una presa di corrente da 230 V. e distante almeno cm. 10 da qualsiasi parete al fine di favorire l'uscita dell'aria.

COLLEGAMENTO ELETTRICO ==> l'apparecchio è dotato di cavo con spina per essere inserita in una presa da 230 V. Hz. 50. Prima di effettuare l'allacciamento elettrico, accertarsi che i dati relativi alla linea di alimentazione siano compatibili con quelli riportati sulla targhetta della macchina e che a monte della presa elettrica sia installato un interruttore magneto-termico. Infine, verificare che la presa di corrente sia compatibile con la spina della macchina e che il circuito abbia la messa a terra.

MODALITA' D'USO ==> questo apparecchio serve per la pulizia di piccoli oggetti e usato nei laboratori di orafi, orologiai, odontotecnici, bigiottieri, ecc. Deve essere usato da personale addestrato all'uso e per lo scopo per cui è stato progettato. La pulitrice è fornita di "supporto conico" fissato all'albero motore mediante avvvitamento dello stesso; a macchina non alimentata controllare sempre, prima dell'uso, che il tutto sia ben fissato. Applicare la spazzola pulitrice sul "supporto conico" e procedere all'avviamento agendo sul pulsante "MARCIA I". Con questa operazione si accende la luce nel vano lavoro, si mette in funzione il motore pulitrice e l'aspirazione. In caso di temporanea mancanza di energia elettrica la pulitrice si ferma e riprenderà a funzionare solo con ulteriore azione su pulsante "MARCIA I". Per spegnere la macchina, premere il pulsante d'arresto "O", interrompendo così tutte le funzioni della macchina.

PULIZIA E MANUTENZIONE ==> Prima di procedere a qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione è importante e necessario staccare la spina dalla presa di alimentazione. L'unico intervento da effettuare è la pulizia dei filtri o la sostituzione degli stessi da effettuarsi in base al volume di lavoro effettuato. Procedere come segue:

- nel vano pulizia togliere la griglia protettiva per poter accedere ai filtri;
- estrarre i filtri vecchi, sostituirli o pulirli;
- reinserire i filtri nel vano filtri;
- riposizionare la griglia.

Per una pulizia più accurata togliere le due viti che fissano il cestello portafiltri in modo da poter effettuare una pulizia anche nel vano sottocestello. Per la pulizia esterna non usare getti, spruzzi d'acqua, aerosol, ma solo un panno umido.

Per la sostituzione della lampada 230 V. 25Watt., rimuovere la vite che fissa la protezione in policarbonato. Effettuata l'operazione, rimontare il tutto correttamente. Durante il funzionamento, il rumore emesso è pari a circa 78 dB(A) e pertanto è consigliabile l'uso di una cuffia protettiva.

- Non rimuovere assolutamente lo schermo protettivo.
- Non rimuovere la griglia protettiva quando l'aspiratore è in funzione.
- Non montare o smontare le spazzole quando il motore pulitrice è in funzione.

Avvertenza: il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, cose o animali derivanti da un cattivo o improprio uso della macchina. Indossare sempre idoneo abbigliamento antinfortunistico quale guanti, occhiali e mascherina. Non indossare mai anelli, braccialetti, orologi, catenine o qualsiasi altro oggetto che possa restare impigliato durante la lavorazione o che, comunque, possa concorrere ad arrecare pericolo per l'operatore, terzi, cose o animali.

GARANZIA ==> questo modello di macchina è garantito per 12 mesi dalla data di acquisto contro qualsiasi difetto di materiale o di costruzione, i componenti che dovessero risultare difettosi all'origine verranno sostituiti gratuitamente. La nostra responsabilità si intende limitata alla sola riparazione o sostituzione delle parti che a nostro insindacabile giudizio si dimostrassero non efficienti. E' esclusa la sostituzione integrale della macchina. I difetti non chiaramente attribuiti ai materiali utilizzati dal costruttore o alla fabbricazione verranno esaminati presso la nostra casa costruttrice.

Nel caso il reclamo risultasse ingiustificato, tutte le spese di riparazione della macchina e/o sostituzione di parti di ricambio verranno addebitate all'acquirente.

La macchina dovrà pervenire presso la sede del costruttore a spese dell'utente, al quale saranno altresì addebitate le spese di spedizione. Le macchine spediteci in porto assegnato non verranno accettate e respinte al mittente.

La garanzia decade qualora:

- l'apparecchio risultasse manomesso e/o riparato da terzi non autorizzati;
- il difetto lamentato sia stato causato da uso improprio della macchina o dall'inosservanza delle istruzioni d'uso e manutenzione esposte nel presente manuale.

Non saranno riconosciute le spese derivanti da danneggiamenti provocati da cadute durante il trasporto oppure dalla sistemazione nell'ambiente di lavoro o comunque non imputabili al costruttore.

E' esclusa dalla garanzia ogni apparecchiatura riparata o manomessa da terzi non autorizzati, nonché gli interventi per vizi o modifiche di comando.

E' escluso il prolungamento della garanzia a seguito di un intervento tecnico. Eventuali estensioni del periodo di garanzia promesse od assicurate dal rivenditore saranno a carico di quest'ultimo.

La decorrenza del periodo di garanzia è determinata dalla data dello scontrino fiscale o della fattura di acquisto, la cui fotocopia dovrà tassativamente accompagnare la macchina pena l'addebito delle prestazioni eseguite.

La garanzia non comporta alcun risarcimento di danni, diretti o indiretti, di qualsiasi natura verso persone o cose durante il periodo di eventuale inefficienza dell'apparecchiatura.

DATI TECNICI/ TECHNICAL FEATURES/CARATTERISTIQUES TECHNIQUES	
Pressione acustica/ pressure acoustics/ pression acoustique	78 dB(A)
Potenza aspiratore/ suction motor power/ puissance apirateur	Watt 400
Capacità aspiratore / air capacity/capacité de l'aspirateur	mc/h. 400
Voltaggio monofase/ voltage single-phase/ voltage monophasé	Volt 230 Hz.50
Dimensioni/ encombrance/ encombrement	cm 50x34x33
Peso/ weight/ poids	kg. 19
Potenza totale/ total power/ puissance totale	Watt 500

Ci si riserva di modificare dimensioni, caratteristiche e materiali senza preavviso. / We reserve the right to change specification without notice./ On reserve le droit de changer les caractéristiques sans avis.

**ASPIRATION HOOD WITH POLISHING LATHE - SENIOR MODEL ART. 350/00
INSTALLATION, USER AND MAINTENANCE MANUAL**

INSTALLATION: The Senior model aspiration hood with polishing lathe will operate in conditions of optimum safety when correctly installed in the laboratory. Position the unit on a level surface on a stable support near a 230 V electrical socket outlet, ensuring it is at least 10 cm from all walls or obstructions to ensure proper ventilation.

ELECTRICAL CONNECTION: the appliance is equipped with an electrical cable fitted with a plug for connection to a 230 V 50 Hz mains socket outlet.

Before making the electrical connection, check that the values of the electrical mains are commensurate with the data shown on the appliance dataplate and that the electrical line is protected by a thermal-magnetic circuit breaker. Check also that the electrical socket outlet is compatible with the plug on the appliance power cable and that the mains circuit is complete with an earth wire.

OPERATION: this appliance is designed for polishing small items in jewellers and watchmakers workshops and dental laboratories, etc.. The appliance must be used by skilled personnel trained in the operation of this type of equipment and with experience in the type of work to be performed. The lathe is equipped with a "taper coupling" screwed onto the motor arbour; before connecting the appliance to the power supply, always check that the coupling is securely attached to the motor arbour.

Fit the polishing brush to the taper coupling and screw it tight, pressing the "START 1" pushbutton. This action switches on the light in the enclosure, starts the lathe and also starts the aspiration system. In the event of a temporary electrical power loss the lathe will stop: when power is restored the lathe will not restart until the "START 1" pushbutton is pressed again. To switch off the appliance press the "STOP O" pushbutton. This action deactivates all functions of the appliance.

CLEANING AND MAINTENANCE: Important: before commencing cleaning or maintenance work unplug the appliance plug from the electrical socket outlet. The only user maintenance operation is cleaning or replacement of the filters, which must be performed on the basis of the intensity of use of the appliance. Proceed as follows: remove the protective grille from the work enclosure in order to gain access to the filters; remove the filters and clean or replace; refit the filters in the filter compartment and then refit the grille. For more thorough cleaning, periodically unscrew the two screws that secure the filter holder basket in order to gain access to and clean the space below the basket.

Do not use water jets, water spray or aerosols to clean the exterior of the appliance. Use exclusively a damp cloth.

To replace the 230V 25W lamp remove the screw securing the polycarbonate diffuser. After changing the lamp refit the diffuser.

During operation of the appliance the noise level is approximately 78 dB(A) – use hearing defenders.

Warning: the manufacturer declines all liability for possible injury to persons or animals or damage to property caused by incorrect or improper use of the appliance. Always wear personal safety accessories, namely gloves, safety glasses and a facemask.

Do not wear rings, bracelets, watches, chains or necklaces, which could become entangled in moving parts of the appliance or which could, in any event, represent a source of danger for the operator, other persons, animals or property.

- Never remove the protective screen
- Do not remove the protective grille when the aspirator is running
- Do not attempt to fit or remove brushes when the lathe is running

Warranty: this appliance is guaranteed against defects of material or workmanship for 12 months from the date of purchase; all defective parts will be replaced free of charge.

The manufacturer's liability is limited to the repair or replacement of parts which, at its sole discretion, are considered to be in improper working order.

The warranty does not cover the replacement of the entire appliance. Any defects not clearly related to the materials utilized or workmanship must be assessed by the manufacturer in the factory.

In the event of unjustified warranty claims, all expenses for the repair of the appliance and/or replacement of parts will be charged to the purchaser. The appliance must be shipped to the manufacturer's factory at the expense of the purchaser; the purchaser will also be charged for shipping costs incurred in returning the appliance. Any appliances sent to the manufacturer "carriage forward" will not be accepted and will be returned to the sender.

The warranty will be invalidated in the following cases:

- if the appliance has been tampered with or repaired by unauthorized persons;
- if the defect is found to have been caused by improper use of the appliance or by the failure to observe the instructions in this user and maintenance manual;

Costs deriving from damage caused during transport or during installation of the appliance, or any other damage not attributable to the responsibility of the manufacturer, will not be covered under the terms of the warranty.

The warranty does not cover appliances that have been repaired or tampered with by unauthorized persons; the warranty also excludes interventions regarding modification of the controls. The warranty shall not be extended further to technical interventions. Costs relating to any extensions in the terms of the warranty specified or promised by the dealer must be borne entirely by this latter.

The warranty takes effect as from the date on the receipt or purchase invoice, a photocopy of which must be forwarded with the appliance in the event of warranty claims. If this document is not submitted, any work performed will be automatically charged for.

The warranty expressly excludes compensation for direct or indirect damages of any whatsoever nature in relation to persons or property such as may be calculated during periods in which the appliance is unavailable for use.

TECHNICAL DATA	
Sound pressure	78 dB(A)
Suction motor power	400 W
Aspiration capacity	400 m ³ /h
Single-phase power supply	230 V 50 Hz
Dimensions	50 x 34 x 33 cm
Weight	19 kg
Total power consumption	500 W

The manufacturer reserves the right to change specifications without notice.