

Niente più dolore per tuoi pazienti



PT MASTER™ 3

Innovativa tecnologia ad ultrasuoni
per trattamenti paradontali indolore



INNOVAZIONE
e **EVOLUZIONE**



carlo de giorgi

CON **PT MASTER™ 3** LA PAURA DI ANDARE DAL DENTISTA VERRÀ ELIMINATA



Trattamento parodontale assolutamente **indolore**



Vibrazioni circolari

Per una **migliore dispersione** della forza d'impatto tra inserto e dente



Lunga durata degli inserti

Design degli inserti studiato appositamente per i trattamenti parodontali, per un'ablazione a **360°**



Sistema indolore

Grazie alle vibrazioni minime, con un'ampiezza di solo 20-60 µm, **il trattamento risulta assolutamente indolore e confortevole per il paziente**



Il 90% della popolazione è colpita da malattie parodontali



5 trattamenti



Con solo 5 trattamenti, il costo del PT MASTER 3 viene completamente ammortizzato.



UTILIZZO DEGLI INSERTI



Curvatura destra



Usata per ablazioni subgingivali, parodontale, pulizia delle tasche e pianificazione delle radici nel primo e quarto quadrante.



Curvatura sinistra



Usata per ablazioni subgingivali, parodontale, pulizia delle tasche e pianificazione delle radici nel secondo e quarto quadrante.

Touch system

- Pannello di controllo semplice da utilizzare
- Ultra sensibile
- Waterproof
- Variazione della potenza semplice e chiara
- Controllo tramite indicatore progressivo



Sistema automatico di alimentazione dell'acqua

- Ricarica semplice e veloce tramite il coperchio apribile posto sul serbatoio
- Utilizzabili soluzioni disinfettanti
- Gradazione in *ml* segnalata in modo chiaro per un facile riempimento

Manipolo con tecnologia a LED

- Migliore visibilità del sito
- Leggero ed ergonomico
- Efficienza sorprendente
- Unica tecnologia di assemblaggio per una maggiore durata
- Sterilizzabile in autoclave a 135° C



Design ergonomico degli inserti

- Studiati appositamente per i trattamenti paradontali
- Più sottili rispetto gli inserti tradizionali per un migliore accesso al sito
- Realizzati in titanio, delicati sui denti, non danneggiano né lo smalto né le gengive
- Massimo comfort per il paziente
- Lunga durata, non si spezzano



Steril box

- Indispensabile per la sterilizzazione di manipolo, punte e chiave dinamometrica
- Realizzata in acciaio inox
- Sistemazione conservazione degli strumenti
- Utile per la preparazione degli strumenti per una rapida scelta durante il trattamento
- Alta qualità e lunga durata



PT MASTER™ 3 TRATTAMENTO EFFICACE, PAZIENTI SODDISFATTI

EFFETTI DEL TRATTAMENTO

Benefici rispetto ai trattamenti effettuati con apparecchiature tradizionali



Prima del trattamento



Eliminazione o riduzione dei segni di infiammazione marginale (edema e sanguinamento)




Riduzione significativa e stabile della quantità di placca batterica e del tartaro depositato sulla superficie dei denti



Evidente miglioramento delle condizioni paradontali


MINORI DANNI PER I DENTI

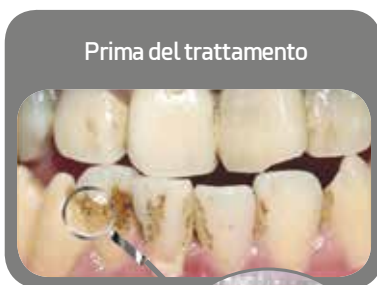


Ingrandimento 150 X



Ingrandimento 150 X

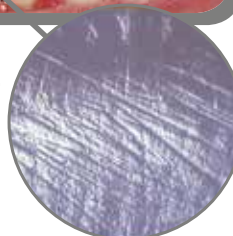



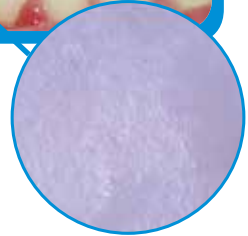


Ingrandimento 150 X





PT MASTER 3 grazie al suo sistema innovativo ad ultrasuoni, permette un trattamento che preserva i denti da danni e lesioni rispetto a trattamenti effettuati con apparecchiature tradizionali.

PT MASTER™ 3 ALTE PRESTAZIONI

	Trattamento specifico paradontale	Efficaci vibrazioni circolari
	Inserti in titanio	Non danneggiano lo smalto dei denti
	Tecnologia a Led	Migliore visibilità, evita lesioni accidentali
	Basso costo d'esercizio	Lunga durata degli inserti. Si rompono meno facilmente
	Trattamento indolore	Vibrazioni minime, massimo comfort

Caratteristiche tecniche	
Frequenza	28000 HZ
Ampiezza di vibrazione	20-60 µm
Durezza inserti	30 HRC - protezione cemento (durezza cemento 30-40)
Profondità di trattamento	14 mm
Dimensioni (LxPxH)	28 x 17 x 18 cm
Peso	2 Kg

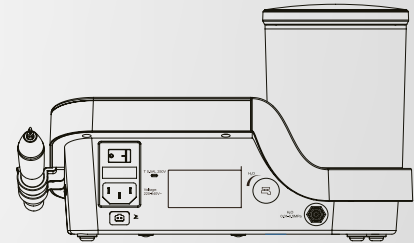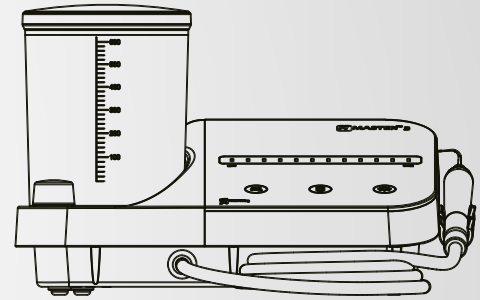

IN DOTAZIONE

- 2 manipoli con tecnologia a Led
- 8 inserti in titanio, 6 per la detartrasi sopragengivale e sottogengivale, 2 specifici per il trattamento paradontale
- 2 chiavi dinamometriche per un inserimento sicuro e igienico
- 2 steril box



Via Tonale, 1 | 20021 Baranzate (MI)
 T. +39 02 356 1543 r.a. | F. +39 02 356 1808
www.degiorgi.it | info@degiorgi.it

